

フラクショナル RF イーロスプラス

Sublative RF

フラクショナル RF イーロスプラス 承認取得のご案内

シネロン・キャンデラ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長 栗城祐治）は、この度、2019年9月30日付で、日本市場における「フラクショナル RF イーロスプラス」の医療機器製造販売承認を取得致しましたのでご案内申し上げます。



2つの国内初！

- 国内初の美容目的の「RF」医療機器
- 国内初の「審美性改善」の適応が認められた医療機器

使用目的または効果

審美性の改善のための皮膚のフラクショナルリサーフェシングを目的とした軟組織の蒸散に使用する。


医療機器承認番号 30100BZX00155000

CANDELA™
Science. Results. Trust.

特長

サブレイティブ RF のアプローチ

サブレイティブは、RF（高周波）をフラクショナル（細かい点状）に照射することで、表皮への熱ダメージを最小限に抑えながら、真皮へ温熱作用を効果的に伝播・作用します。一般的にレーザーなどの光エネルギーは皮下内においては、深部へ到達する程減衰します。サブレイティブのアプローチは、RFエネルギーによる加熱領域が円錐状に形成される為、表皮への熱ダメージを最小限に抑えて真皮へ効果的な蒸散作用を促し、コラーゲン繊維の産生を促進させます。主に小じわや毛穴開大の改善、肌質改善などに効果が期待できます。

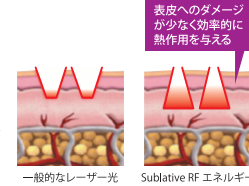

表皮へのダメージが少なく効果的に熱作用を与える

サブレイティブ RF テクノロジー

サブレイティブは、多電極ピンの配列を介して、バイポーラ RF エネルギーをフラクショナル（細かい点状）に皮膚に送達するように設計されています。

さらに RF エネルギーは、電気エネルギーでメラニンや血管の分布に吸収されない為、肌の色に関係なく使用することができます。



様々な症状に対応する3つのトリートメントプログラム

サブレイティブは、患者さん一人一人のスキンタイプや主訴を考慮した3つのプログラムで構成されており、様々な症状に合わせて、エネルギー強度、深さを細かく設定することが可能です。



フラクショナル RF イーロスプラス Sublative RF

お問い合わせフォーム

お手数をおかけいたしますが、必要事項をご記入・該当する項目にチェックの上 FAXにてお送り下さい。

東京本社 FAX: **03-3289-2160**

メールでもお問い合わせを受け付けております。info@candelakk.jp

スマホ・ケータイから



お問い合わせフォームにキャンペーン内容と施設名、お名前をご記入ください。

お問い合わせ内容 詳しい説明を希望 見積もり希望 カタログ・資料希望 デモ希望

ご施設名	診療科
ふりがな 姓 名	役職 <input type="checkbox"/> 院長 <input type="checkbox"/> 医師 <input type="checkbox"/> 看護師 <input type="checkbox"/> その他 ()
ご芳名	
〒	
ご施設住所	
ご施設電話番号	FAX
Email	*メールアドレスに今後弊社からのご案内を配信してもよろしいでしょうか。 <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 希望しない

ご記入いただいた個人情報は、当社サービスの御案内に利用します。お客様のご同意なく個人情報を提供することはございませんが、一部の業務（宛名作成、資料発送など）について委託をすることがございます。以上につきまして、ご同意の上ご記入ください。

CANDELA™

【製造販売元】シネロン・キャンデラ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-8-7 交詢ビル 8F
TEL. 03-3289-2077 FAX. 03-3289-2160
■ カスタマーコールセンター 0120-954-760

【支店】東京・名古屋・大阪・福岡

【営業所】札幌・仙台・岡山

【サービスセンター】埼玉・神奈川・千葉・神戸

【物流センター】〒143-0006 東京都大田区平和島 6-5-1
東京流通センター C棟 Cブロック
近鉄ロジスティックシステム内
FAX. 03-5763-7200

【製造元】Syneron Medical Ltd.

【国名】イスラエル